


# AccuFab-L4D Impresora 3D dental

Creada para la odontología



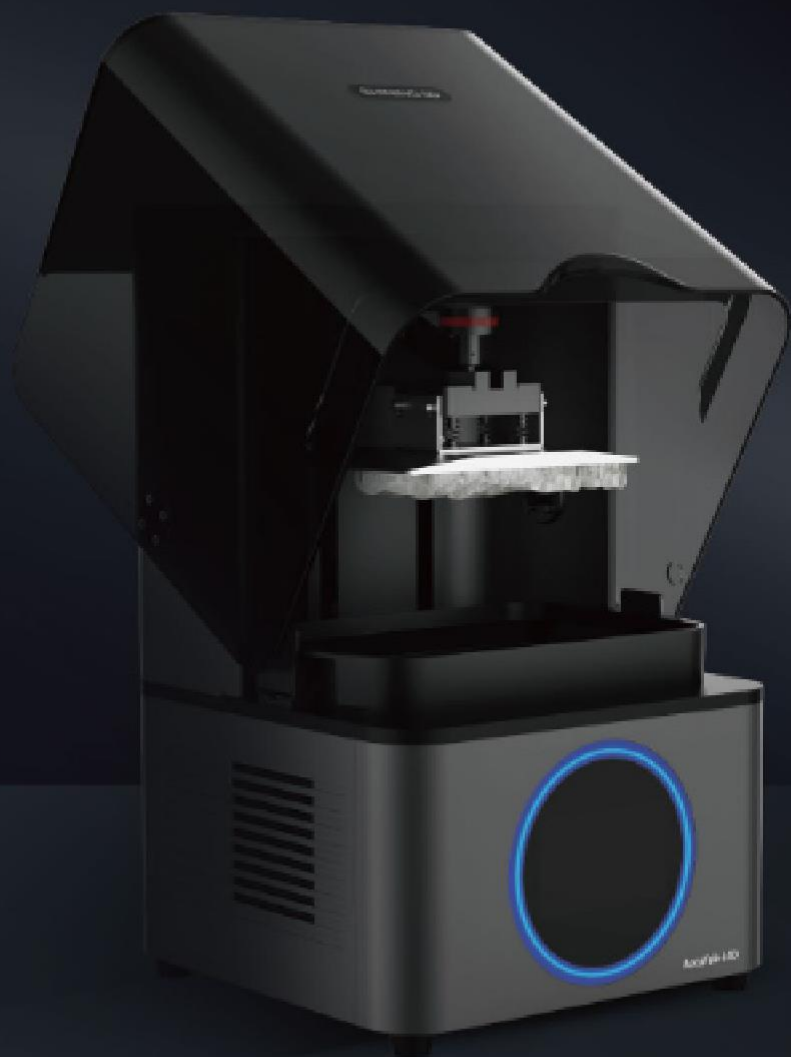

# AccuFab-L4D

## Impresora 3D de gran formato

AccuFab-L4D es la última incorporación a las soluciones digitales de la familia SHINING 3D. Es una impresora 3D dental de gran formato desarrollada completamente por SHINING 3D para hacer que la solución de impresión 3D sea más accesible para todos. Brinda a los usuarios una experiencia de impresión única con características como: peso ligero, tamaño de impresión grande y operación fácil de usar.



4K

### Tamaño de impresión grande, alta resolución

El tamaño de impresión de 192 \* 120 mm y la resolución 4K satisfacen las demandas de los usuarios en cuanto a eficiencia y detalles.



### Fácil de usar

El software de impresión de desarrollo propio de SHINING 3D, AccuWare, viene con un flujo de trabajo guiado para ayudar a los usuarios a través del proceso de impresión para una operación fácil y conveniente. Se jacta de una planificación de diseño inteligente, con la generación de soporte en un solo clic e impresión con un solo clic, lo que hace que sea bastante fácil comenzar.




### Inversión rentable

AccuFab-L4D, compacto y rentable, ayuda a los usuarios a lograr una transformación digital sencilla.



### Varias opciones de materiales

SHINING 3D SHINING DENT cubre una amplia gama de materiales de resina para aplicaciones de impresión dental, como modelos de trabajo, modelos para ortodoncia, guías quirúrgicas, calcinable tipo cera y mascarillas gingivales.

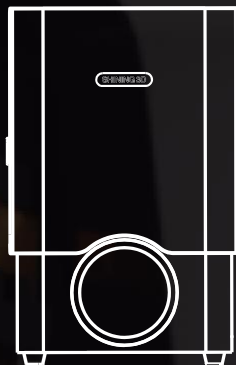

# Más de lo que esperabas

Las funciones integrales de AccuFab-L4D contribuyen a llevar el proceso de digitalización dental de los usuarios a otro nivel. Admite diferentes aplicaciones dentales, como modelo dental, modelo para ortodoncia, guía quirúrgica, etc.

# Peso ligero, fácil de usar

Con el fin de hacer que la tecnología de impresión 3D sea más accesible para más usuarios, AccuFab-L4D incorpora una serie de diseños intuitivos para simplificar todo el proceso, desde la preparación y corte de datos hasta la operación y mantenimiento.



## Operación interactiva guiada

5 pasos: Configuración de impresión – Abrir archivo – Diseño – Soporte – Corte



## Tecnología UVMP

Tecnología SHINING 3D de desarrollo propio, precisión de impresión significativamente optimizada.



## 200% mejor eficiencia óptica

Trayectoria óptica optimizada para mejorar la eficiencia óptica al 200%; Solo toma 25 minutos imprimir una placa completa de 8 modelos de ortodoncia..



## Vínculo entre IOS y la impresora 3D

La herramienta de edición desarrollada de forma independiente proporciona a los usuarios funciones de edición de modelos, vinculando el proceso de escaneo e impresión más allá de las expectativas.



## Vista previa

Obtenga una vista previa de los datos cortados con anticipación para garantizar una impresión exitosa.




## Calibración automática

La calibración automática asegura una impresión estable y consistente.

\* UVMP son las siglas de fotopolimerización enmascarada UV.



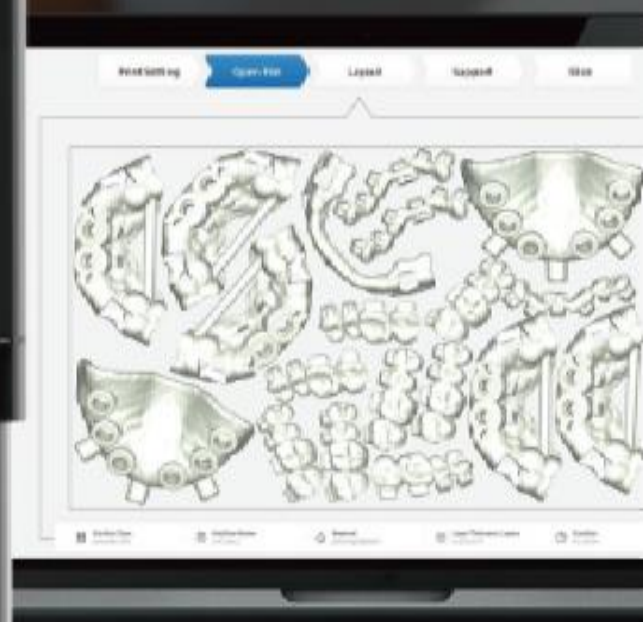

# SHINING DENT

## Múltiples materiales certificados

SHINING DENT presenta una serie de materiales de resina desarrollados independientemente por SHINING 3D. Estas resinas se pueden adoptar en diversas aplicaciones de impresión dental, como modelo de trabajo, modelo orto, cubeta de impresión personalizada, guía quirúrgica y máscara gingival. AccuFab-L4D es su solución de impresión 3D ideal.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## AccuFab-L4D

Tamaño de la impresora	360 x 360 x 530 mm
Peso de la impresora	19 kg
Volumen impresión (x/y/z)	192 x 120 x 180 mm
Resolución	3840 x 2400(4K) Px
Velocidad de impresión	10-50mm/h (depende del espesor de la capa y de los materiales)
Grosor de la capa	0.025/0.05/0.075/0.1 mm
Precisión	±50 µm
Connectividad	USB/Wi-Fi/Ethernet

\* Aviso: SHINING 3D se reserva el derecho de introducir modificaciones o alteraciones en cualquiera de las especificaciones e imágenes utilizadas en este documento.

